


A close-up, high-quality portrait of a woman's face, focusing on her eyes, nose, and lips. Her hand is gently touching her cheek, with her fingers visible. The lighting is soft and warm, highlighting the texture of her skin. The background is a gradient of light blue and green.

CYNOSURE ConBio™

Revlite™

Una revolución en la tecnología Q-Switched

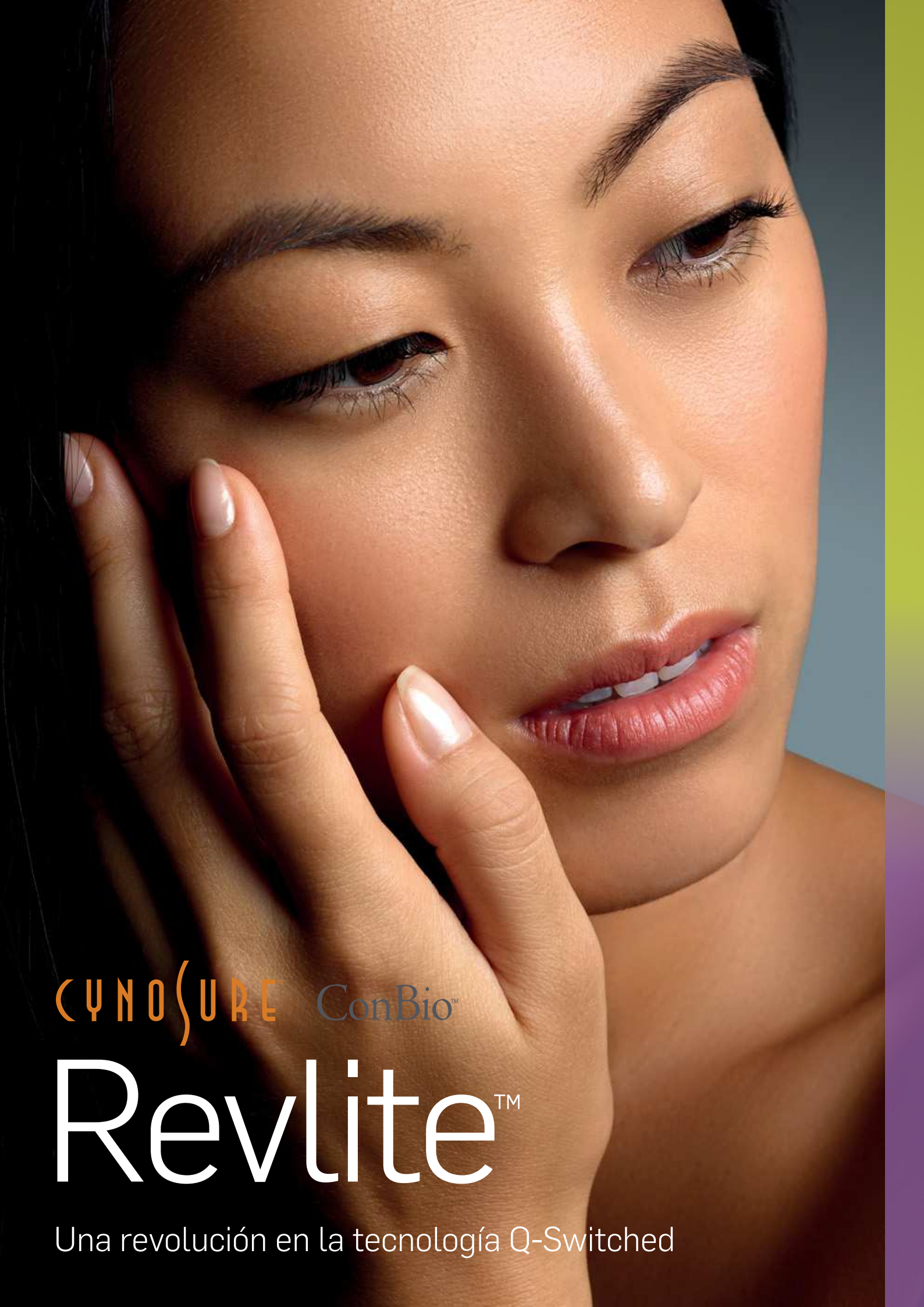

Fiabilidad y versatilidad demostrada

La fiabilidad y versatilidad de Revlite permite efectuar tratamientos rápidos en todos los tipos de pieles con unos resultados predecibles y reproducibles.

32,⁸

MILLONES

de tratamientos médico
estéticos de láser estimados
en 2017 en el mundo¹

8,⁹

MILLONES

de dólares facturados por
tratamientos dermocosméticos
láser en todo el mundo en 2017.¹

Revlite (tecnología
Q-Switched de
Nd:YAG) incorpora
PhotoAcoustic Pulse™
(PTP), que permite
ofrecer máxima
potencia y versatilidad.

Melasma
Lesiones pigmentadas
Rejuvenecimiento facial
Arrugas
Cicatrices de acné
Eliminación de tatuajes



CYNOSURE ConBio®
Revlite™

Fiabilidad demostrada

Revlite™ es un referente mundial en tecnología Q-Switched. Numerosas publicaciones de profesionales de reconocido prestigio en el sector avalan su historial de éxitos y su eficiencia clínica.

Mayor versatilidad

- Un intuitivo interfaz de usuario (GUI) reduce el tiempo de preparación con opciones de tratamiento pre establecidas para una mejor adaptación al paciente.

Mayor potencia

- Su gran potencia junto con la capacidad de emitir pulsos muy cortos, provocan un efecto fotoacústico que elimina el cromóforo objetivo a la vez que minimiza el daño al tejido circundante.
- Al poder controlar la potencia de la energía emitida, Revlite puede distribuirla uniformemente sobre la piel, reduciendo de forma significativa los posibles efectos colaterales.

Características opcionales

Piezas de mano MultiLite™ Dye

Aumenta la capacidad de longitud de onda del láser para llegar a 585 nm y 650 nm y así poder tratar también tatuajes y lesiones pigmentadas.




Pieza de mano 532Lite

Permite proporcionar bajas emisiones de energía en spot más pequeños (2 mm) para el tratamiento de lesiones pigmentadas.



Tecnología PhotoAcoustic Pulse™ (PTP)

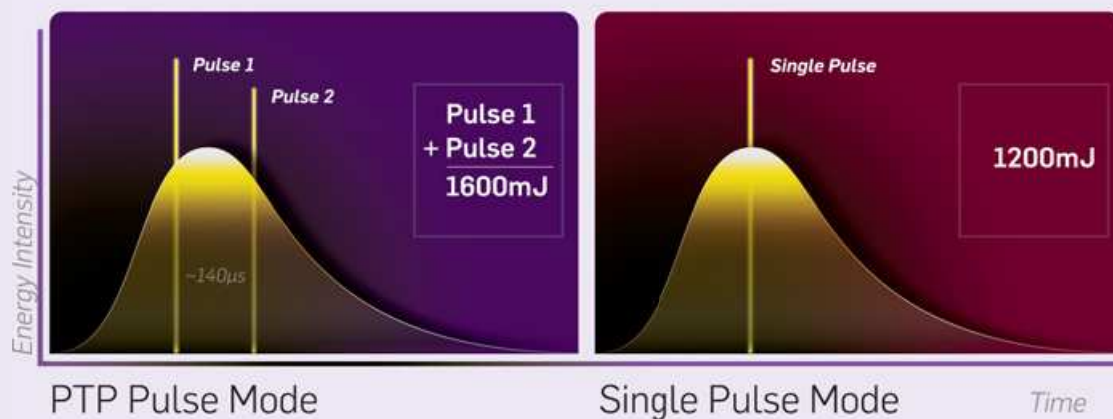

- El modo de doble pulso de PTP permite emitir máximo de fluencia en un sólo pulso
- El lapso de microsegundos entre pulsos proporciona mucha energía con lo que se consigue mejores resultados a la vez que aumenta el confort del paciente²

“Estoy realmente impresionada por los resultados únicos de Revlite: instantáneos y extraordinarios. Todos mis pacientes están muy satisfechos con sus tratamientos y esperan impacientes el siguiente”.

— Dra. Angela Lee, Clínica Ever Beauty, Hong Kong

“Tras tratar a más de 500 pacientes, puedo decir con sinceridad que Revlite es uno de los mejores láseres para melasmas, pigmentaciones cutáneas y fotorejuvenecimiento. Todos mis pacientes se muestran muy satisfechos con los resultados, además su uso es sencillo y no precisa ningún mantenimiento. Uso mi láser al menos 7 horas al día, seis días por semana y sigue ofreciendo los mismos resultados que el primer día. Aquellos médicos que estén decidiendo adquirir un láser Nd:YAG con tecnología Q-Switched, les recomendaría sin duda Revlite”.



— Dr. Chytra V Anand, Director médico en la clínica Kosmoderma, Bangalore, India

Para más información visite cynosure.es/producto/revlite


Los resultados en nuestros
pacientes nos avalan.



Cortesía del Dr. P. Peng

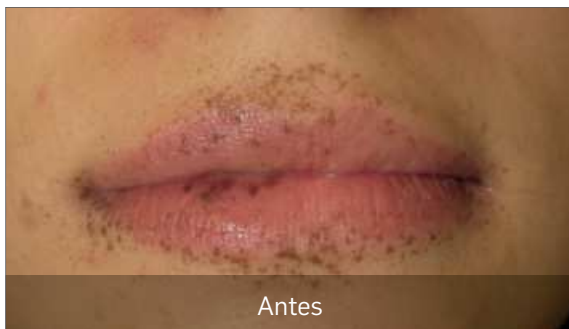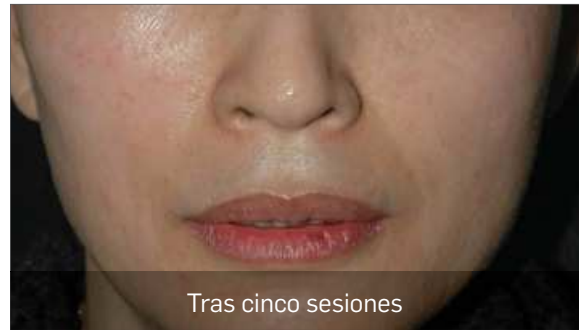


Cortesía del Dr. H. Cartier

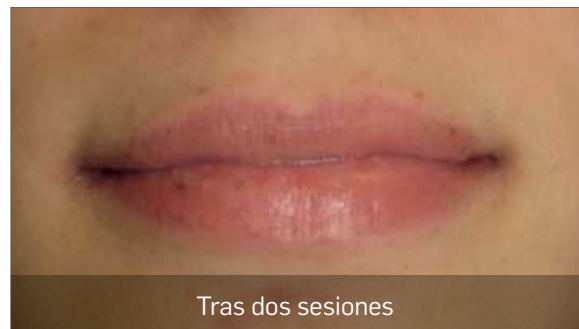

Cortesía del Dr. T. Tu



Cortesía del Dr. H. Cartier

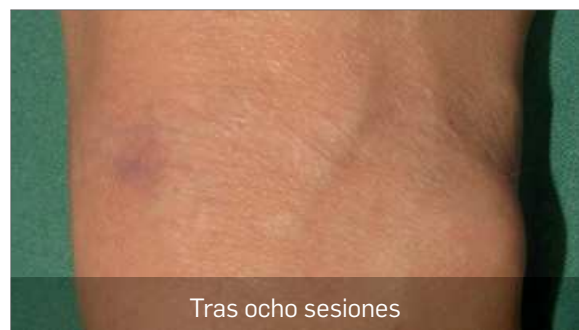

Tipo de sistema	Nd: YAG		Pieza de mano 532Lite	Polímeros impregnados Dye	
Longitud de onda	1064 nm	532 nm	532 nm*	585 nm*	650 nm*
Ancho de pulso	5 – 20 ns		5 – 20 ns	menos de 7 ns	
Máxima fluencia por tamaño de spot					
8 mm	2,3 J/cm²	—	—	—	—
6 mm	4,2 J/cm²	1,5 J/cm²	—	—	—
4 mm	9,4 J/cm²	3,4 J/cm²	—	—	—
3 mm	16 J/cm²	6,0 J/cm²	—	—	—
2 mm	—	13 J/cm²	2,4 J/cm²	8,6 J/cm²	5,5 J/cm²
	—	—	—	6,5 J/cm²	4,1 J/cm²
	—	—	—	4,3 J/cm²	2,7 J/cm²
	—	—	—	2,2 J/cm²	1,4 J/cm²
Tecnología PTP					
8 mm	3,1 J/cm²	—	—	—	—
6 mm	5,5 J/cm²	1,6 J/cm²	—	—	—
4 mm	12,0 J/cm²	3,7 J/cm²	—	—	—
3 mm	21,0 J/cm²	6,5 J/cm²	—	—	—
2 mm	—	14,0 J/cm²	—	—	—
Frecuencia máxima de repetición	10 Hz		10 Hz	2 Hz	1 Hz
Luz láser	Roja, intensidad variable				
Requisitos eléctricos	220 V, Monofase, 8 Amp, 50/60 Hz, 10 Amps a 220 V AC				
Tamaño (A x P x A)	113 cm x 30,5 cm x 72,5 cm				
Peso	59,4 Kg				

* Pieza de mano opcional

CYNOSURE[®]

MiDiBen Medical
Distribuidor exclusivo en México
(81) 1001 7073
info@midiben.com

